

Funktionstasten

Benutzer Einstellungen

GECAMed wird mit einer Reihe von **Tastenkürzel** (auch **Tastenkombinationen** oder nur **Tasten** genannt) ausgeliefert. Einige davon sind fest eingebaut und können nicht verändert werden, andere können benutzerspezifisch überschrieben werden.



Vor allem im Patientenmodul gibt es mehrere Gruppen von fest vorgegebenen Funktionstasten: In der Navigationsleiste gibt es drei Gruppen von Schaltflächen die jeweils mit Funktionstasten aktiviert werden können, wie links gezeigt. Wenn man mit der Maus über eine dieser Schaltflächen fährt werden die Funktionstasten mit einem Tooltip angezeigt.

Da diese Funktionstasten-Belegungen nicht entfernt oder überschrieben werden können, es aber in der Praxis zu Konflikten mit speziellen Eingabegeräten oder Programmen (z.B. Dragon Dictate) kommen kann, erlaubt eine besondere Option diese gänzlich zu deaktivieren, indem die Checkbox gelöscht wird. Standardmässig sind diese Funktionstasten aktiviert.

Desweiteren hat der individuelle Benutzer die Möglichkeit, verschiedene GECAMed-Funktion mit eigenen Funktionstasten zu belegen. Öffnen Sie dazu den Menüpunkt "Einstellungen" ⇒ "Einstellungen" und in dem erscheinenden Fenster den Punkt "Funktionstasten" in der linken Seitenleiste ([Abbildung 1](#)).

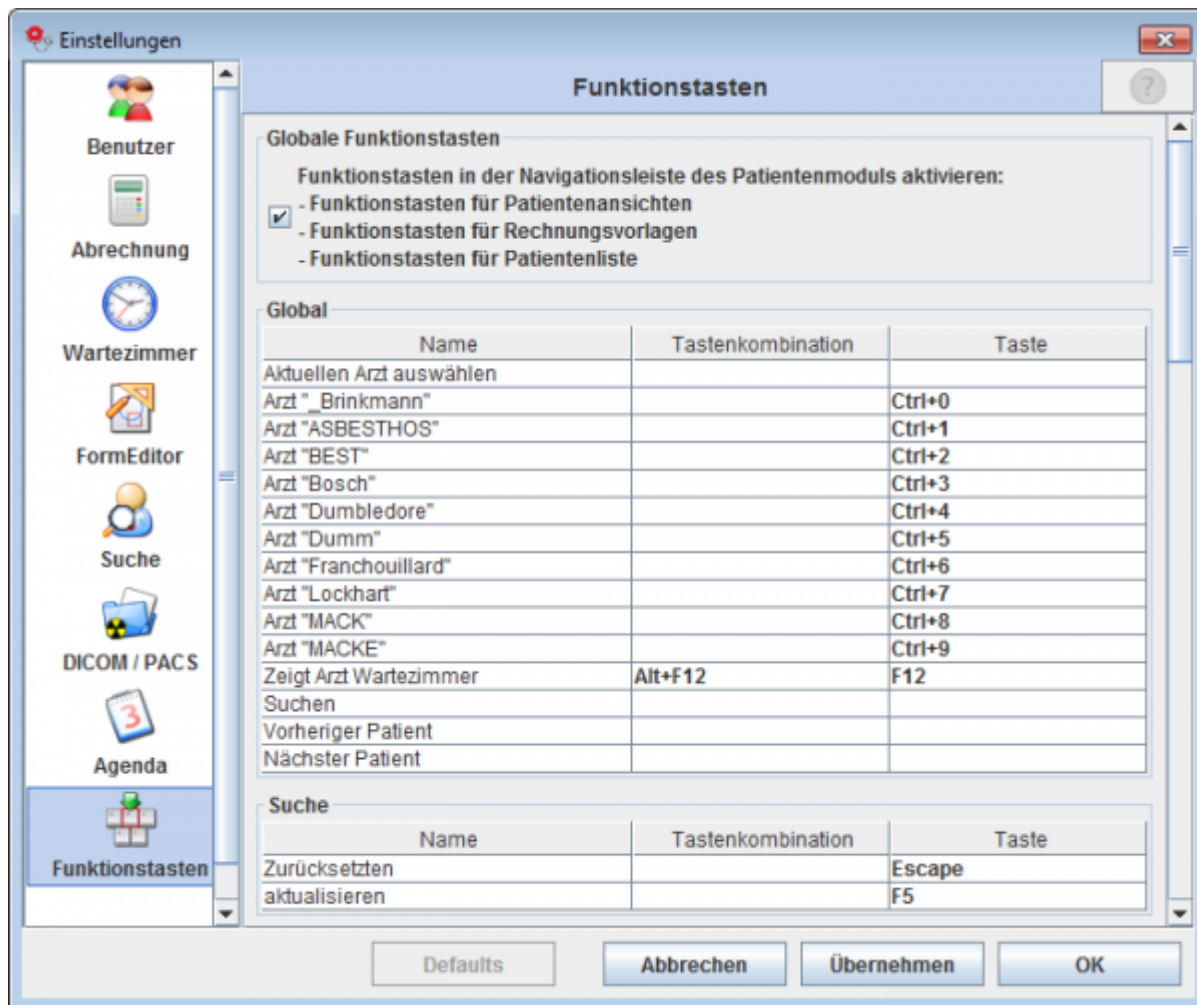


Abb. 1:

Benutzer Einstellung Funktionstasten.

Die GECAMed-Funktion sind in Bereiche (Global, Patient u.s.w) aufgeteilt. Für jeden Bereich gibt es eine eigene Belegungstabelle der Funktionstasten. Diese Tabelle enthält den Namen der GECAMed-Funktion, eine erste Spalte für eine ALT-Tastenkombination, und eine zweite Spalte für eine weitere beliebige Taste. Beide können Sie frei wählen um die Funktion aufzurufen. Um eine GECAMed-Funktion mit einer ALT-Tastenkombination oder einer Taste zu belegen klicken Sie einfach in die dafür vorgesehene Spalte und drücken dann die entsprechende Tastenkombination oder Taste.

From:

<http://gecamed.lu/> - **GECAMed - Gestion de Cabinets Médicaux**

Permanent link:

<http://gecamed.lu/de/userguide/settings/generalsettings/shortcutkeys>

Last update: **2019/12/09 11:19**

